

## AMAneo

*Et tous les PC, tablettes et smartphones deviennent physiquement accessibles*



**AMAneo** est un adaptateur ANTI Tremblement pour l'utilisation de la souris. Un réglage de filtre électronique permet d'adoucir les déplacements de la souris et ainsi de pouvoir l'utiliser avec précisions.



**AMAneo** peut recevoir des souris standards, mais aussi des systèmes adaptés tels que la souris à mouvement de tête Zono, la souris à commande buccale Integramouse +, les joysticks et souris BJoy, et bien d'autres.

**AMAneo** se décline en deux versions :

- **AMAneo USB** : Filaire pour utilisation sous Windows, Mac OS, Linux et Android via USB OTG
- **AMAneo BTi** : Sans fil Bluetooth pour utilisation sous IOS (iPhone, iPad)

**AMAneo** est particulièrement destiné aux :

- Blessés médullaires hauts (L.I.S, Tétraplégiques...) souhaitant accéder au numérique
- Personnes atteintes de pathologies neurologiques évolutives (SLA, SEP, Parkinson...)
- Autres personnes à faible mobilité souhaitant accéder à son univers numérique.

## AMAneo : Caractéristiques

- L'adaptateur AMANEO anti-tremblement est simplement branché entre la souris et le PC ou l'ordinateur portable via USB ou simplement connecté via Bluetooth à la tablette.
- Il fonctionne avec n'importe quelle souris et n'importe quel système d'exploitation sans aucune installation de logiciel.
- L'intensité du filtre de tremblement peut être ajustée facilement.
- Inclut un délai de clic (le pointeur de la souris s'arrête lorsque vous cliquez dessus) et une fonction de clic automatique est intégrée.
- Des entrées contacteurs permettent de contrôler le bouton gauche et le bouton droit de la souris.

### Accessibilité

Fonction de la souris/joystick original avec :

- Réglage du filtre anti tremblement possible
- Clic sur la souris originale
- Clic automatique
- Clic déportés par contacteur

### Spécifications techniques

- Dimensions : 7.7cm x 7.7cm x 2.6cm
- Version BTi : Autonomie 20 heures selon type de souris utilisée - Batterie Lipo 1250mAh

## Références

Référence	Désignation
7MCSS20520	AMAneo USB
7MCSS20522	AMAneo BTi pour iOS
7H7502	Adaptateur micro USB OTG Android
Contacteur	Voir fiche contacteur

# AMAneo : USB ET Bluetooth

## AMAneo USB

### En branchement filaire




Compatible avec :

- PC
- MAC
- Linux
- Android **avec câble USB OTG** (non fourni)

Câble USB de branchement fourni

## AMAneo BTi

### En connexion bluetooth

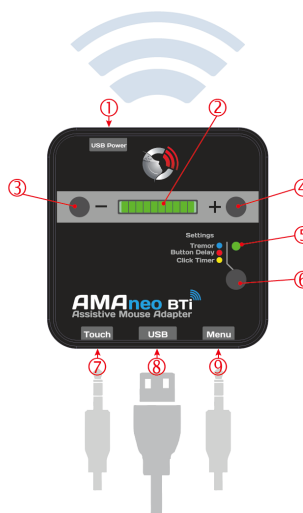

Compatible avec :

- iOS\* (iPhone et iPad)

Autonomie 20 h (selon type de souris)  
Batterie Lipo1250 mAh

### \* Liste des appareils iOS compatibles :

- **IPhones :**  
iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s
- **IPAD :**  
iPad Pro 11", iPad Pro 12.9" (3ème génération), iPad Pro 10.5", iPad Pro 12.9" (2ème génération), iPad Pro 9.7", iPad Pro 12.9" (1ère génération), iPad mini 4, iPad Air 2  
iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (6ème génération), iPad (5ème génération)



## Accompagnement

Par la société Cenomy ou son réseau de prestataires qualifiés, nous vous proposons plusieurs services pour vous accompagner dans un projet durable :

- Expert depuis plus de 30 ans
- Installation/mise en service
- Assistance technique
- Formation spécifique

## Assistance technique

CENOMY issue de Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national et international pour le développement des technologies au service de l'indépendance et de l'autonomie des personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maîtriser, de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela CENOMY propose un service d'assistance technique pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l'utilisation quotidienne de ces technologies. Découvrez les services proposés par l'Assistance Premium sur notre site internet.

## Contacts et renseignements



info@cenomy.com

03 80 78 42 20

[Formulaire de demande d'évaluation](#) sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous »

## Assistance technique

Présentez votre numéro client à l'appel ou dans votre mail



support@cenomy.com

03 80 78 42 49

[Formulaire de prise en charge SAV](#) sur notre site internet dans la rubrique « SAV »

Et retrouvez toute notre actualité sur :

**[www.cenomy.fr](http://www.cenomy.fr)**

