

FICHE TECHNIQUE
OTICON CONNECTLINE
STREAMER PRO 1.3A

Oticon | ConnectLine

Le Streamer Pro constitue la passerelle vers les solutions ConnectLine. ConnectLine permet aux utilisateurs d'aides auditives Oticon de participer et d'interagir dans un grand nombre de situations quotidiennes qui sont difficiles, voire impossibles, même avec les meilleures aides auditives. Le système inclut des solutions spécifiques pour regarder la télévision, utiliser un téléphone fixe et un microphone distant sans fil. Le Streamer Pro prend également en charge le Bluetooth pour la fonction kit mains libres des téléphones portables, etc.

Système totalement intégré

Avec ConnectLine, c'est l'utilisateur qui contrôle le système, et non l'inverse. Des fonctions avancées, telles que AutoPriority et AutoConnect, permettent à l'utilisateur d'entendre un appel téléphonique et d'y répondre tout en regardant la télévision par exemple.

Simplicité éprouvée

Le Streamer Pro a été développé et minutieusement testé en gardant à l'esprit les utilisateurs d'aides auditives¹.

Ecouteur pour la musique

Le son peut être transmis directement et clairement aux deux aides auditives depuis un lecteur MP3 par exemple, à l'aide d'un câble (fourni) ou en sans fil (par Bluetooth).

Kit mains libres pour les téléphones portables

Le Streamer Pro peut être appairé à la plupart des téléphones portables², transformant les aides auditives en une paire d'oreillette haute qualité grâce au microphone intégré se trouvant dans la partie supérieure du Streamer Pro.

Bobine téléphonique

Un récepteur de boucle magnétique est intégré pour les utilisateurs ayant des aides auditives sans bobine

téléphonique, ou pour les utilisateurs qui trouvent plus facile d'utiliser celle du Streamer Pro.

Adaptateur téléphonique ConnectLine

Solution spécifique pour le téléphone fixe. Il transforme le Streamer Pro et les aides auditives en oreillettes sans fil.

Adaptateur TV ConnectLine

Solution spécifique pour regarder la télévision avec une qualité sonore élevée grâce à la transmission directe du son de la télévision vers les aides auditives.

Microphone ConnectLine

Petit et discret, le Microphone à clipser améliore significativement le rapport signal/bruit pour les utilisateurs d'aides auditives lorsqu'elles sont utilisées dans des situations difficiles et bruyantes.

PC/VoIP - plug and play

En utilisant le câble fourni, le Streamer Pro peut être directement connecté à un ordinateur pour se transformer en écouteur.

Entrée FM

Le Streamer Pro possède une interface prenant en charge l'utilisation de récepteurs FM. Visitez www.oticon.fr/solutions rubrique accessoires / AmigoFM pour de plus amples informations.

Application ConnectLine pour iPhone®, iPad®, iPod touch® et appareils Android™

L'application permet de régler, de manière intuitive et discrète, les appareils auditifs et les accessoires ConnectLine.

Disponible gratuitement dans l'App Store et Google Play™.



Références:
1. « Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype » écrit par DialogDesign (« <http://www.dialogdesign.dk> » www.dialogdesign.dk), 15 juin 2011, 14 octobre 2011 et 7 décembre 2011.
2. Visitez www.oticon.fr/support rubrique Utiliser votre téléphone portable pour une liste à jour des téléphones compatibles.



Manufactured by:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global



Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article
L111-3 du code de la consommation.



People First



People First est notre promesse pour rendre à chacun : la liberté de communiquer sans contrainte, d'interagir naturellement et de participer activement.

VUE GENERALE DU PRODUIT

Inclus

- Tour de cou (long et moyen)³
- Adaptateur secteur pour la charge
- Housse de protection en silicone
- Kit câble d'interface PC/audio

3. REMARQUE : le tour de cou fait partie intégrante du système et doit toujours être utilisé pour une performance optimale.

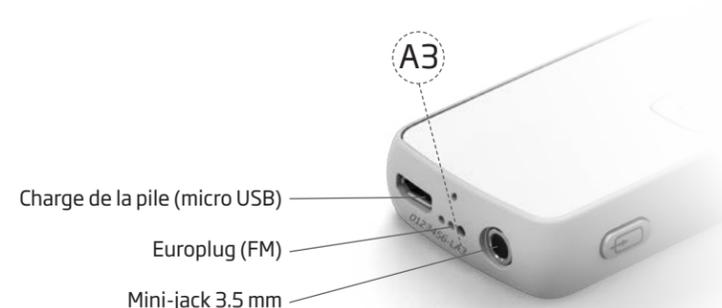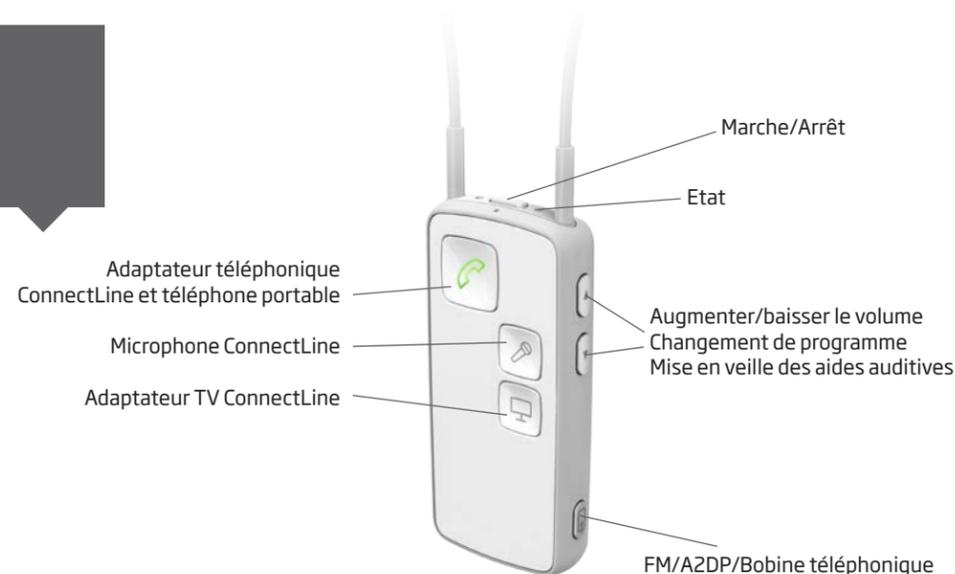

Oticon | ConnectLine

Caractéristiques techniques (version 3.3.X)	
Compatibilité	Toutes les aides auditives Oticon sans fil (nEARlink activé) (à partir d'Epoq, 2007) Genie 2013.1 ou version ultérieure pour la configuration du Streamer Pro
Dimensions	13 x 40 x 85 mm ; poids : 44 g (sans le tour de cou)
Fonctions du système ConnectLine	AutoConnect (le Streamer Pro se connecte automatiquement aux dispositifs qui se trouvent à portée) AutoPriority (le Streamer Pro donne la priorité aux appels téléphoniques)
Solutions ConnectLine spécifiques	Microphone ConnectLine (requiert un équipement supplémentaire) Adaptateur téléphonique ConnectLine 1.0 et 2.0 (requiert un équipement supplémentaire) Adaptateur TV ConnectLine 1.0 et 2.0 (requiert un équipement supplémentaire)
Autres solutions de connectivité	Entrée analogique (mini jack de 3,5 mm) Sortie analogique (mini jack de 3,5 mm), pour l'interface des écouteurs PC (VoIP/Skype). Oreillette pour téléphone portable (profil Bluetooth kit mains libres ou oreillette) Transmission/musique sans fil (Bluetooth A2DP) Entrée FM (Europlug) Bobine téléphonique (intégrée)
Télécommande pour les aides auditives	Volume, changement de programme et désactivation ⁴ des microphones des aides auditives
Batterie ⁵	Utilisation habituelle de 10 heures par jour : 6 heures de diffusion TV + 2 heures de téléphone/autre + 2 heures en veille (capacité de 100% à 80%) 60h en veille (allumé, pas de transmission ou réception sonore) Temps de charge de 2 heures (capacité de 80% à 100%) 6 mois en télécommande uniquement (capacité de 100% à 80%) Durée de vie totale de la pile. Il reste 80% de capacité après 720 cycles de charge/recharge Cela équivaut au minimum à deux années d'utilisation habituelle
Sensibilité de l'entrée mini jack	Max 2Vrms (analogique), impédance: 10 KΩ
Qualité audio ⁶	Mono / 20 kHz fréquence d'échantillonnage
Bande passante audio ⁶	80 Hz - 10 kHz (A2DP/entrée externe)
Détails d'appairage	Jusqu'à 8 dispositifs appairés Jusqu'à 5 dispositifs sans fil actifs pris en charge à la fois (2 téléphones, 1 adaptateur TV, 1 microphone et 1 A2DP). Une seule source peut être écoutée à la fois.
Conformité Bluetooth	Ver. 2.0 + EDR
Profil Bluetooth	Profil audio (A2DP) 1.2 Casque 1.2 Profil Mains libres 1.6 y compris la fonction « Parole en bande large »
Portée sans fil ⁷	10 mètres avec Bluetooth de classe 2 Jusqu'à 30 mètres avec l'adaptateur téléphonique ConnectLine 2.0 et l'adaptateur TV 2.0 Jusqu'à 15 mètres avec le Microphone ConnectLine

Portée d'EarStream	0,5 mètre nominal. Le tour du cou doit être utilisé pour une performance optimale.
Portée de transmission des signaux	Sonneries d'appel entrant et fonction de la télécommande jusqu'à 1 mètre.
Fréquence d'émission	3.84 Mhz
Indications d'état	Voyants lumineux sur le Streamer Pro. Signaux sonores dans les aides auditives.
Emissions	Max. -15dBµA / 10 mètres en accord avec toutes les normes applicables
Humidité de fonctionnement	< 85% d'humidité relative
Température de fonctionnement	10 à 45 °C
Température de stockage	-20 à 70 °C
Personnalisation du Streamer Pro	En utilisant le logiciel d'adaptation Genie (2013.1 ou version ultérieure), un certain nombre de fonctions peuvent être configurées.
	<p>Fonctionnalités Le Streamer Pro peut être dédié uniquement à une utilisation avec la télévision, le téléphone ou le microphone. Utilisation uniquement en télécommande pour le volume, programme et veille - en dehors de tout Streaming.</p> <p>Téléphones portables Rejet d'appel, numérotation du dernier numéro, numérotation vocale, choix d'une sonnerie différente pour le portable, tout bouton en façade répond à l'appel.</p> <p>Autres fonctions Démarrage auto du casque. Alertes sonores entrantes (A2DP) (recevoir les notifications de SMS).</p>
Genie 2013.1 (ou plus récent)	Deux Streamers Pro peuvent être connectés à une paire d'aides auditives. Veuillez noter que le fonctionnement et le réglage fixe des programmes ConnectLine seront différents selon les aides auditives Oticon.
Pièces détachées/accessoires	Clip pour la ceinture Housses de protection Tour de cou noir ou blanc (long, moyen et court)
Compatibilité de l'application ConnectLine	ConnectLine App est compatible avec iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 9,7 pouces, iPad Pro 12,9 pouces, iPad Air 2, iPad Air, iPad (4ème génération), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, et iPod touch (5ème et 6ème génération) et nécessite un Streamer Pro 1.2 App ou une version ultérieure. Lors du téléchargement de l'application ConnectLine App sur iPad, recherchez les applications iPhone dans l'App Store. L'application ConnectLine App pour smartphones et tablettes Android nécessite le Streamer Pro avec firmware 1.3 ou version ultérieure. Rendez-vous sur le site www.oticon.fr/connectivity , pour de plus amples informations sur la compatibilité.

Les mentions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu spécialement pour être connecté à un iPod, iPhone ou iPad, respectivement, et a été certifié conforme aux normes de performance d'Apple par le développeur. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes sécuritaires et réglementaires. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut influencer sur les performances sans fil.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.

Références:

4. Oticon Alta ou version ultérieure
5. En utilisant le tour de cou et le chargeur fournis
6. La performance audio dépend des aides auditives du client
7. Visibilité directe entre le Streamer Pro et l'autre dispositif